


ENYA BOND

23

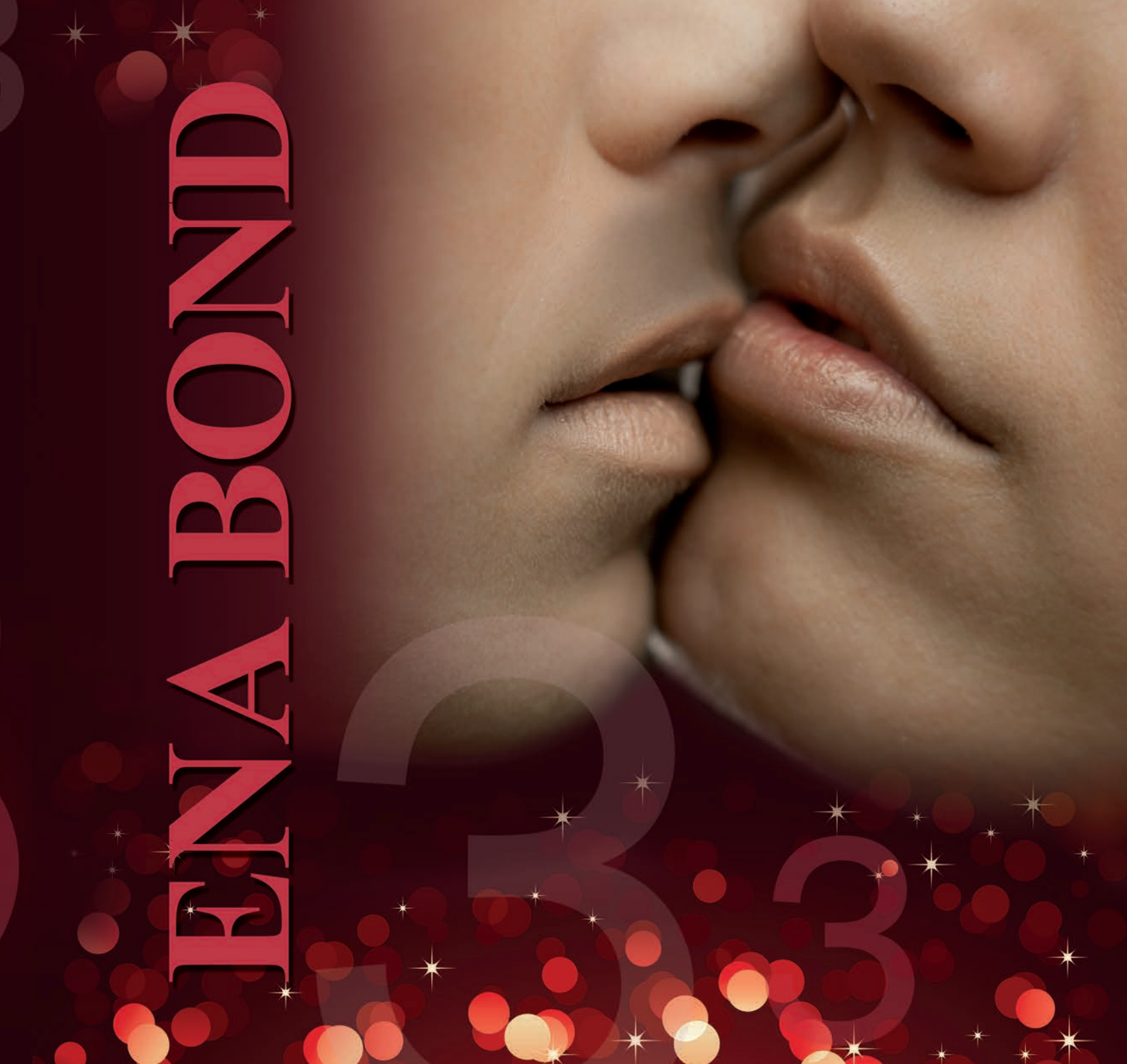

ADESIONE: 3 scelte sicure

ETCH & RINSE

ONE-BOTTLE

- Estetica & ritenzione
- Fluorescente come il dente naturale
- Composizione speciale a base di etanolo
- Disponibile catalizzatore che consente utilizzo con compositi duali
- **Valori di adesione superiori alla media del mercato: 30 MPa***

* Studio effettuato dall'Università di Chieti - Prof. Camillo D'Arcangelo



ETCH & RINSE



TWO-BOTTLE

Adesivo Primer+Resina di IV generazione

Utilizzando Ena Bond come Primer ed Ena Seal come secondo strato di resina adesiva non caricata, si ottengono ottimi risultati di adesione ed un perfetto sigillo, trasformando Ena Bond in un sistema adesivo Primer+Resina

- **Ottimi valori di adesione su dentina: 24 MPa***

* Studio effettuato dall'Università di Chieti - Prof. Camillo D'Arcangelo

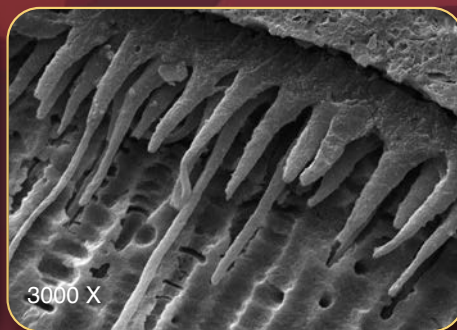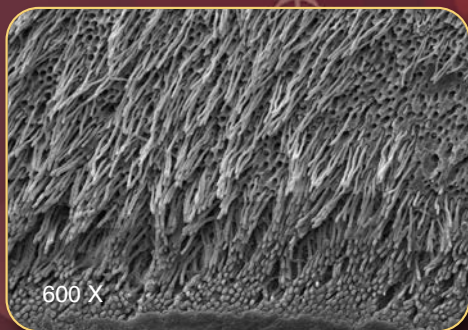

Immagini al SEM a 600X e 3000X dello strato ibrido ottenuto con la tecnica two bottles, si notino la quantità e la profondità dei resin tags
Università di Chieti
(Prof. Camillo D'Arcangelo)


ENAbond®

SELF ETCHING

- Valori di adesione* superiori alla media del mercato:
 - 24 MPa su dentina
 - 17 MPa su smalto non mordenzato
 - 20 MPa su smalto mordenzato
- Composizione speciale in soluzione acquosa




Smalto mordenzato e dentina trattati con Ena Bond SE al microscopio a scansione (SEM) Microscopie eseguite presso l'Università Tor Vergata di Roma dal Prof. Francesco Mangani che ha contribuito dopo 3 anni di ricerche e test alla realizzazione di Ena Bond SE

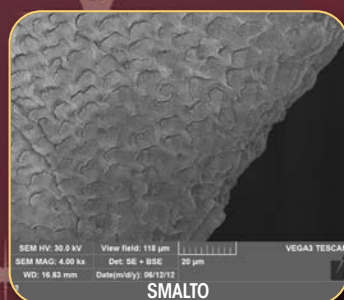

Smalto e dentina trattati con Ena Bond SE al microscopio a scansione (SEM) La microscopia mostra la superficie dello smalto ed i "resin-tags" che evidenziano la penetrazione di Ena Bond SE nei tubuli dentinali (Prof. Vassilios Kaitsas)

Micro Tensile Bond Strength

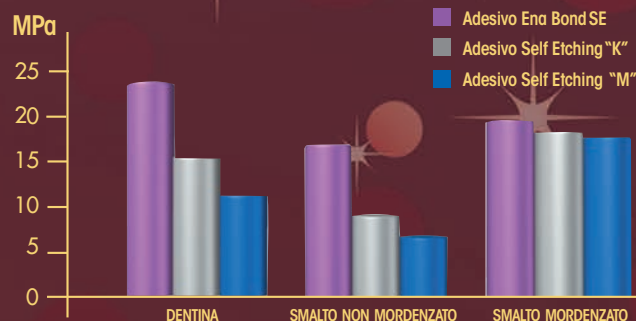


* Comparazione dei dati di adesione di Ena Bond SE con altri due sistemi adesivi self-etching con Primer Università di Chieti (Prof. Camillo D'Arcangelo)

ENAcem^z

CEMENTO PER ZIRCONIA

Cemento autopolimerizzabile con primer speciale per cementare elementi protesici in zirconia (ZrO₂) su monconi in zirconia e titanio (Ti)

Share Bond Strength

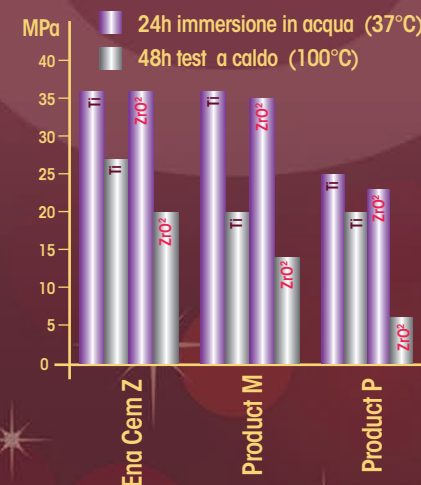

CPCZK Ena Cem^z per zirconia
Kit introduttivo:
cemento autopolimerizzabile 8 g
Primer 5 ml

CPCZ Ena Cem^z per zirconia
cemento autopolimerizzabile 8 g

CPCZP Ena Cem^z per zirconia
Primer 5 ml

ENA  cem^z


ADESIONE: **3** scelte sicure

ENA  bond

CEMENTO
PER
ZIRCONIA



con Primer
speciale

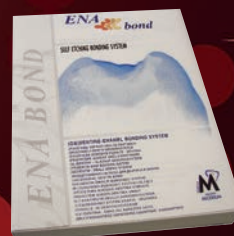

Ricambi COSM300

ONE-BOTTLE

ENA BOND ADESIVO ONE-BOTTLE	
Ena Bond fotopolimerizzabile	5 ml
Ena Etch Acido ortofosforico 37%	2 ml
Accessori	

COSM300A Ena Bond fotopolimerizzabile	5 ml
COSM300D Ena Bond catalizzatore	5 ml
COSM101B Ena Etch Acido ortofosforico 37%	29 ml

Ricambi COSM300K

TWO-BOTTLE

ENA BOND ADESIVO TWO-BOTTLE	
Ena Bond fotopolimerizzabile "primer"	5 ml
Ena Seal fotopolimerizzabile resina fluida	5 ml
Ena Etch Acido ortofosforico 37%	2 ml
Accessori	

COSM300A Ena Bond fotopolimerizzabile	5 ml
COSZ10 Ena Seal	5 ml

Ricambi CFOTK

SELF-ETCHING

ENA BOND SE ADESIVO SELF-ETCHING	
Ena Bond SE Primer	5 ml
Ena Bond SE Bonding fotopolimerizzabile	5 ml
Ena Etch Acido ortofosforico 37%	2 ml
Accessori	

ENA BOND SE ADESIVO SELF-ETCHING	
Ena Bond SE Primer	5 ml
Ena Bond SE Bonding fotopolimerizzabile	5 ml

Ricambi CFOT

CFOTP Ena Bond SE Primer	5 ml
CFOTS Ena Bond SE Bonding Fotopolimerizzabile	5 ml


GRUPPO
MICERIUM

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83-16036 Avegno (GE) Italy • Tel. 0185 7887 870
micerium@micerium.it • www.micerium.it

File: EndBond IT v2, 2021-10