

CLED2

LED Dental Curing Light

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZATRICE E RILEVATORE DI PLACCA E CARIE
DUAL LED 405/460 nm (range 390/480)



- >> Low 600 mW/cm²
- >> Ramp 1000 mW/cm²
- >> Standard 1000 mW/cm²
- >> High 1800 mW/cm²
- >> Turbo 2400 mW/cm²
- >> Fast Ortho 1800 mW/cm²
- >> Rilevazione placca 250 mW/cm²
- >> Rilevazione carie 350 mW/cm²

Vantaggi

CLED2
LED Dental Curing Light

LOW

RAMP

STANDARD

HIGH

TURBO

FAST
ORTHO

PLAQUE

CARIES

Un tocco per servirvi della
potenza della luce



La lampada è stata prodotta con LED 10 W ad altissima luminosità, di due frequenze diverse. La lunghezza d'onda della luce di CLED2 è compresa tra 390-480 nm con picchi di 405/460 nm; l'intensità può raggiungere 2400mW / cm². Può polimerizzare in 2 secondi uno strato di composito di oltre 2 mm. Queste caratteristiche consentono di agire efficacemente anche con i foto-iniziatori fenil propanedione (PPD) e il Lucirine TPOD.

Nessun spegnimento durante l'utilizzo


Il sistema intelligente di gestione del calore impedisce al dispositivo di surriscaldarsi dopo un uso continuo.

Radiometro integrato

Display OLED, facile controllo dell'intensità.

Batteria a cartucce

Design innovativo e semplicità nella sostituzione.

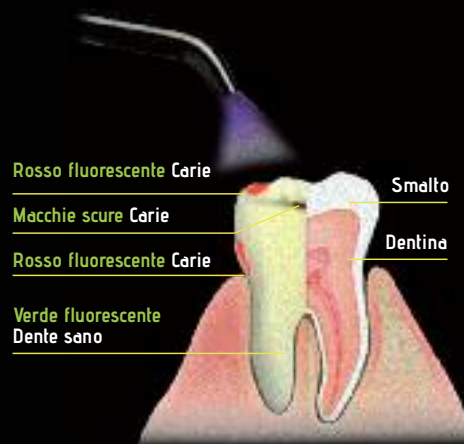

Modalità

Applicazione

Low	Dente e resina composita
Ramp	Incrementale. Ampie aree di resina composita, per evitare retrazione (distacco)
Standard	Maggior parte dei casi
High	Per ortodonzia o odontoiatria pediatrica
Turbo	Cementi dentali, veneer in porcellana, perni in fibra
Fast Ortho	Per bande e bracket
Rilevazione placca	Ideale per la rilevazione della placca dentale. Placca e tartaro saranno localizzati dalla colorazione rossa della luce fluorescente.
Rilevazione carie	Ideale per rilevare la carie. La rilevazione della carie, con presenza di carica batterica, viene rilevata dalla colorazione rossa della luce fluorescente o dalla presenza di macchie scure.

WORLDWIDE DISTRIBUTOR:
Micerium SpA

Via G. Marconi, 83-16036
Avegno (GE) Italy
Tel. (+39) 0185 7887 870

micerium@micerium.it • www.micerium.it

