



COLORAZIONE UNIVERSALE

Si adatta a qualsiasi cromaticità del dente naturale

Si adatta alla natura


Risultati estetici
tempi ridotti alla poltrona

- Trasparenza molto elevata
- Vero effetto camaleonte
- Restauri invisibili
- Il composito si adatta al colore naturale del dente
- Una sola massa consente di restaurare elementi dentali di qualsiasi cromaticità

3 Componenti



1. Tonalità Universale
2. Tonalità opaca

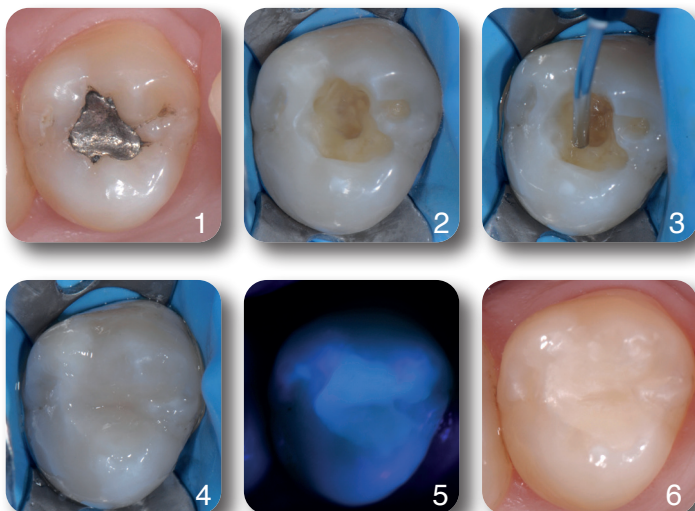


Ricostruzione del primo molare con Capo 1 Universale eseguita dal Dr. Francesco Simoni.

1.Caso prima - 2. Preparazione - 3. Applicazione composito Capo 1 Universale
4. Ricostruzione finale - 5. Controllo fluorescenza - 6. Lucidatura, Caso finito.



3. Bulkfill Universale per restauri posteriori in 1 step

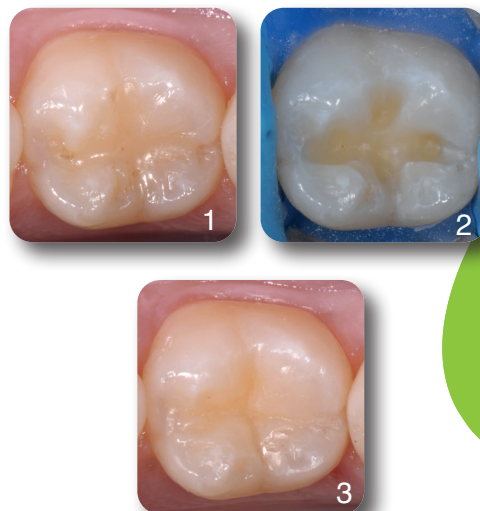

Ricostruzione del primo molare con Capo 1 Bulk Fill eseguita dal Dr. Francesco Simoni.

1.Caso prima - 2. Preparazione e applicazione composito Capo BulkFill Universale
3. Ricostruzione finale e lucidatura





CAPO 1 Capo 1 Universale Capo 1 Opaco Universale

Composito microibrido traslucido per restauri di anteriori e posteriori
Composito microibrido opaco per schermare discromie del dente da restaurare prima di utilizzare Capo 1 Universale

	CAPO 1	Competitor1	Competitor2
Resistenza alla flessione (MPa)	150	107	78
E modul (GPa)	12655	9524	7745
Resistenza alla compressione (MPa)	479	394	377
24h Durezza Vickers (MPa)	690	610	611

VANTAGGI

- > Colore universale = si adatta al colore del dente
- > Proprietà fisiche straordinarie (contenuto approssimativo di riempitivo 75%)
- > Radiopaco
- > Fluorescente
- > Compatibile con la maggior parte degli adesivi
- > Altamente lucidabile

INDICAZIONI

- > Otturazioni posteriori e anteriori



CAPO 1 Capo 1 BulkFill

Composito fluido traslucido per restauri di posteriori

	CAPO 1 BulkFill	Competitor1	Competitor2
Resistenza alla flessione (MPa)	134	128	112
E modul (GPa)	11090	6500	4800
Resistenza alla compressione (MPa)	381	394	377
24h Durezza Vickers (MPa)	737	380	300



VANTAGGI

- > Colore universale = si adatta al colore del dente
- > Facile e veloce da utilizzare, per strati di spessore fino a 4mm
- > Minima contrazione = sicuro da utilizzare
- > Proprietà fisiche straordinarie (contenuto approssimativo di riempitivo 77%)
- > Non necessita di strati aggiuntivi per coprire la cavità = risparmio di tempo
- > Alta radiopacità (210% Al) garantisce diagnosi affidabili tra riempitivo e dente naturale
- > Compatibile con la maggior parte degli adesivi
- > Biocompatibile: privo di bisfenolo A, HEMA e TEG-DMA
- > Incredibile scorrevolezza
- > Facile da lucidare

INDICAZIONI

- > Otturazioni con strati di spessore fino a 4 mm in cavità di classe I e II di Black
- > Otturazioni con strati di base di spessore fino a 4 mm in cavità di classe I e II di Black da coprire con composito microibrido
- > Utilizzo come sottofondo in otturazioni di cavità di classe I e II di Black

