



CORRETTORE DI CLASSE II E III

Il sistema CS5® crea livelli di forza istantanei e costanti, fornendo una forza più uniforme e costante che funziona meglio e dura più a lungo. Questo sistema Non Compliance per Classi II e III è uno dei più utilizzati al mondo grazie alla sua semplicità, efficacia e convenienza rispetto ad altri sistemi oggi disponibili.

II Classe



III Classe




TRATTAMENTO II CLASSE



Casi clinici gentilmente concessi dal Dr. Michael Williams

TRATTAMENTO III CLASSE

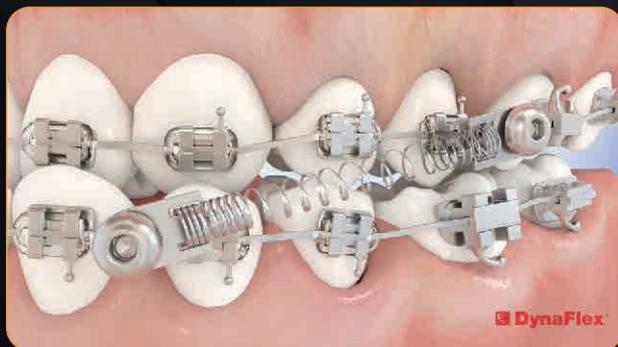

III CLASSE RADIOGRAFIA



Casi clinici gentilmente concessi dal Dr. Andy Hayes St. Louis, MO

CS® SPRING

Le **CS Spring** in NiTi sono un'esclusiva DynaFlex®, che utilizza una molla a spirale chiusa brevettata a forza istantanea (350 grammi) e un'estremità "key-hole". Appositamente costruita con uno speciale nichel titanio con all'estremità due anelli.



TWIST-LOCK™ PIVOT

Il nuovo perno **Twist-Lock™** è stato abilmente progettato come un componente unico senza parti mobili. Questo garantisce un'installazione senza problemi e migliori prestazioni.



HYBRID SCREW NYLOK™

Le viti ibride sono rivestite con **Nylok™** blu intorno alla filettatura della vite. Questo materiale di grado medico è di colore blu per una facile identificazione e garantisce un montaggio più sicuro. Il rivestimento della filettatura della vite offre resistenza all'allentamento all'interno del perno e sigilla la filettatura della vite in posizione.



MAGNETIC ALLEN PENCIL

Il nuovo strumento **Allen** è stato disegnato e progettato per rendere il posizionamento del sistema CS® veloce e sicuro. Lo strumento Allen viene "caricato" utilizzando un esclusivo magnete. Una volta caricato, utilizza le forze magnetiche per agganciarsi alla vite. La vite è facilmente estraibile dal kit e rimane sullo strumento per il posizionamento e il serraggio nella bocca del paziente.



Descrizione	Q.tà	Codice
Kit 5 pazienti CS Spring 10 pz Twist-Lock Pivot 20 pz Hybrid Screw Nylok™ 20 pz Magnetic Allen Pencil 1 pz Magnete 1 pz	1 pz	39-T10-5M
CS® Spring 10 mm.	1 pz	38094
Twist-Lock Pivot	1 pz	3810T
Hybrid Screw Nylok™	1 pz	3815-5MC
Magnetic Allen Pencil	1 pz	3823-EM
Magnete	1 pz	3823-500