




DR. LORENZO VANINI, THE CLINICIAN BEHIND THE SYSTEM



Lo smalto Enamel plus HRi, grazie all'indice di rifrazione 1,62, ha un comportamento ottico molto simile a quello dello smalto naturale: aumentando lo spessore aumenta il valore.

Con questo smalto è possibile gestire meglio il rapporto traslucenza-valore e l'integrazione estetica del margine poiché la luce attraversa due corpi (smalto naturale e smalto composito) che hanno lo stesso indice di rifrazione e quindi la luce non subisce deviazioni, problema che a livello clinico si presenta con una linea grigia sul margine; inoltre nei restauri del solo smalto libero incisale si integra perfettamente sostituendo a tutto spessore lo smalto naturale e mantenendo alto il valore senza dover usare masse dentina, cosa impossibile con gli smalti del commercio.

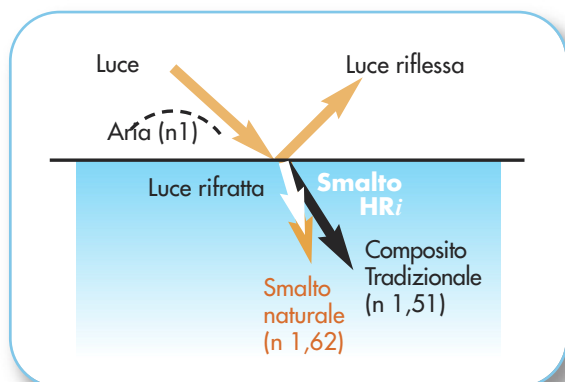

HRi