



CIANOACRILATO ROCKET DVA

Cianoacrilato rosso con induritore spray


Cianoacrilato completamente calcinabile, per unire elementi di un ponte evitandone la distorsione, per posizionamento di perni, riparazione di monconi, incollaggi su articolatori.

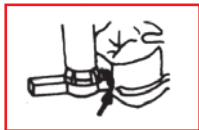

Fissaggio di precisione di attacchi da saldare

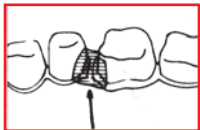


Connessione di segmenti di ponte da saldare

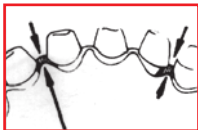


Unione di elementi in cera per evitare distorsioni



Chiusura di sottosquadri

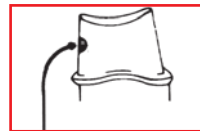

Chiusura di bolle

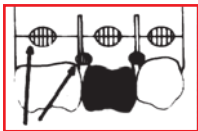

Stabilizzazione di monconi

Ref	Descrizione	Q.tà
DVAIHR	KIT CIANOACRILATO CALCINABILE ROSSO Siringa cianoacrilato con beccuccio Acceleratore spray Dispenser a vite e supporto per siringa	1 x12 g 60 ml 1 pz
DVARHR	Siringa cianoacrilato rosso	12 g
DVARA	Acceleratore spray	60 ml
DVATWIST	Dispenser a vite per siringa	1 pz
DVAROTIPS	Beccucci di ricambio Rocket	10 pz
TX90K	KIT CIANOACRILATO TRASPARENTE LIGHT Siringa cianoacrilato con beccuccio Acceleratore spray Dispenser a vite e supporto per siringa	1 x12 g 60 ml 1 pz
TX90R	Siringa cianoacrilato trasparente light	12 g

RESINA CALCINABILE AUTOPOLIMERIZZABILE

Resina per modellazione Micerium senza retrazione per fusioni perfette


Questa resina é ideale per la fabbricazione di parti secondarie di protesi (telescopiche, fresaggi), fissazione di saldature, ponti, ancoraggi, attacchi e perni calcinabili. E' utilizzabile con tecnica del pennello o di mescolazione.



Perni moncone




Corone doppie

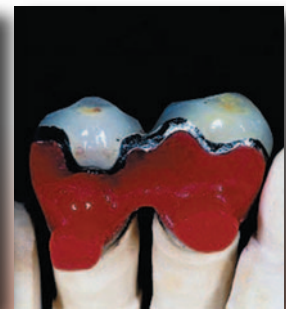

Fresaggi (e ponti Maryland)

VANTAGGI OPERATIVI

- Calcinabile: brucia senza residui
- Bassissima retrazione: <1%

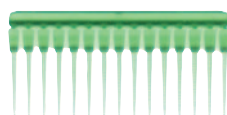

Ref	Descrizione	Q.tà
TR100	TEMP RED RESINA AUTOPOLIMERIZZABILE ROSSA CALCINABILE Polvere 100 g + Liquido 100 ml	2 pz
TR100P	Temp Red Polvere ricambio	100 g
TR100L	Temp Red Liquido	100 ml
DURL94	Perni calcinabili	60 pz