

Microsabbiatrice Dentoprep: completamente in acciaio!

Le microporosità aumentano la ritenzione meccanica fino al 40%

APPLICAZIONI EXTRAORALI:

- corone metallo-ceramiche
- perni
- inlay e onlay
- ponti Maryland
- rimozioni di cementi

APPLICAZIONI INTRAORALI:

- riparazioni di ceramica e composito
- pulizia di superficie prima di cementare

CARATTERISTICHE:

- sterilizzabile fino a 135°C
- connettori attacco rapido per turbina

Codice	Descrizione	
RON1900	Sabbiatrice Dento-Prep da studio	
RON1903	DENTOPREP DUST-CABINET 230Volts sistema aspirante con interno illuminato Alt.x Lung.x Larg.: 180x315x225 mm (4,130 kg)	
RON1906	Ossido di alluminio 50 micron	1 kg
RON1926	Connettore Dentoprep	6 mm
RON1930	Connettore Dentoprep	Midwest
RON1935	Connettore Dentoprep	Sirona
RON1936	Connettore Dentoprep	W e H
RON1937	Connettore Dentoprep	Kavo
RON1938	Connettore Dentoprep	Bien Air
RON1939	Connettore Dentoprep	NSK

OFFERTE ECCEZIONALI!

Sistema riparazione Tender C04R1

- Kit riparazione Tender COSRIP1
- + Sabbiatrice Dentoprep RON1900
- + Sabbia ossido di alluminio RON1906
- + 1 connettore a scelta

**omaggio
omaggio**

SISTEMA RIPARAZIONE TENDER C04R2

- Sistema aspirante Dust Cabinet RON1903
- + Sabbiatrice Dentoprep RON1900
- + Kit riparazione Tender COSRIP1
- + Sabbia ossido di alluminio RON1906
- + 1 connettore a scelta

**omaggio
omaggio
omaggio**



File: Tender Repair it v2_09-2011

Tender
System *repair*

*Riparazioni
di ceramiche
senza acido*



- *Maggior Biocompatibilità*
- *Senza rischi per i tessuti*
- *Maggiore adesione*


MICERIUM S.p.A. Via G. Marconi, 83 -16036 Avegno (GE) Italy
Tel. (+39) 0185 7887 870 Fax (+39) 0185 7887 970
www.micerium.it - micerium@micerium.it

estefica
M
GRUPPO
MICERIUM


RIPARAZIONE RAPIDA, SICURA ED AFFIDABILE



1 *sabbiatura*

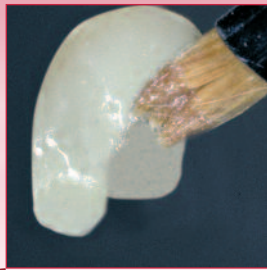

2 *Tender Bond*
su metallo e ceramica

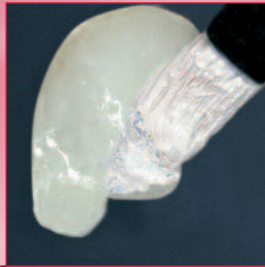

3 a. *Tender opaque*
su metallo



3 b. *Tender clear*
su ceramica




4 *Composito dentina*

Enamel plus HRi
con pennelli in gomma
TPENS




5 *Composito smalto*

Enamel plus HRi
smalti opalescenti, intensivi
e generici

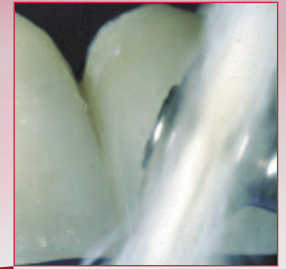

6 *lucidatura*

Enamel plus SHINY
paste diamantate
con spazzolino
pasta ossido di alluminio
con feltrino

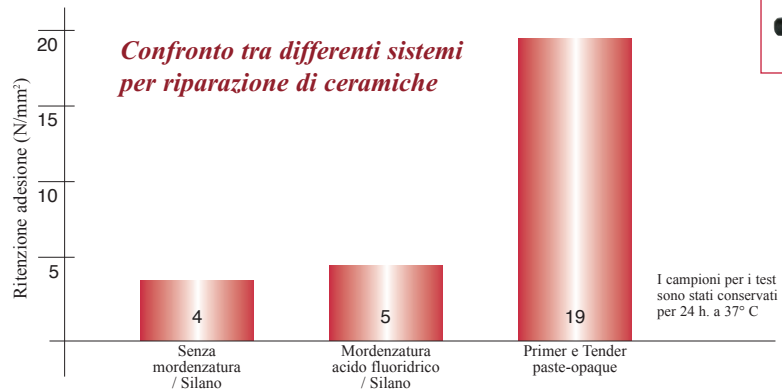

KIT RIPARAZIONE TENDER PER CERAMICA - REF. COSRIP2

- 1 x 2,5 ml. Tender Bond metal-ceramic primer
- 1 x 3 g. Tender paste opaque clear per adesione/copertura ceramica
- 1 pennello Enamel plus "M"

KIT RIPARAZIONE TENDER PER CERAMICA & METALLO - REF. COSRIP1

- 1 x 2,5 ml. Tender Bond metal-ceramic primer
- 1 x 3 g. Tender paste opaque clear per adesione/copertura ceramica
- 1 x 3 g. Tender paste opaque O2 per adesione/copertura metallo
- 1 pennello Enamel plus "M"